

## FLEXI TESTER<sup>®</sup> FTS2900

**Manganese**  
0.00 - 5.00 mg/l Mn<sup>2+</sup>



QUALITY REAGENTS  
MADE IN GERMANY



### Attention!

Reagents for chemical analyses only! Do not ingest! Keep out of the reach of children! Store in a cool and dry place! Protect from frost! Protect the parameter stick from moisture.



### Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen! Nicht verschlucken! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Kühl und trocken lagern! Vor Frost schützen! Den Parameter-Stick vor Feuchtigkeit schützen.



### ¡Atención!

¡Reactivos sólo para análisis químicos! ¡No ingerir! Manténgase fuera del alcance de los niños. ¡Conse-  
var en lugar fresco y seco! ¡Proteger de las heladas!  
Proteger el stick de parámetros de la humedad.



### Attenzione!

Reagenti solo per analisi chimiche! Non ingerire!  
Tenere fuori dalla portata dei bambini! Conservare  
in luogo fresco e asciutto! Proteggere dal gelo!  
Proteggere lo stick di misurazione dall'umidità.



### Attention!

Réactifs uniquement pour les analyses chimiques  
! Ne pas ingérer ! Ne doit pas être laissé à la  
portée des enfants ! Conserver au frais et au sec  
! Protéger du gel ! Protéger le stick de paramètres  
de l'humidité.



Reagents



Reagenzien



Reactivos



Reagenti



Réactifs



## FTS2900

PPHMGNSLR1  
Manganese LR No.1  
Photometer

PPPMGNSLR2  
Manganese LR No.2  
Photometer




# WATER-I.D.<sup>®</sup>

WATER TESTING EQUIPMENT ●●●


1

Fill with 10 ml of  
water sample

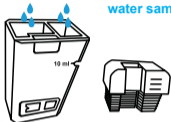


2

1 x Manganese  
LR No.1  
Powder Pillow

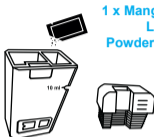


3

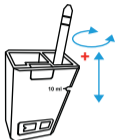


4

1 x Manganese  
LR No.2  
Powder Pillow

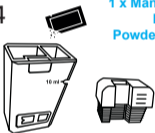

5

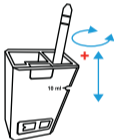

6

5 min.



7

Insert FTS2900 stick  
Manganese  
0.00 - 5.00 mg/l  
Mn<sup>2+</sup>



QUALITY REAGENTS  
MADE IN GERMANY

Water-i.d. GmbH  
Daimlerstr. 20  
D-76344 Eggenstein  
Tel. +49 (0) 721 - 782029-0  
Fax +49 (0) 721 - 782029-11  
[www.water-id.com](http://www.water-id.com)  
[info@water-id.com](mailto:info@water-id.com)

